

医疗药品目录

1: 达霖堂远红外治疗贴	2
2: 舒妙得液体敷料	3
3: 诺月硅凝胶敷料膜	4
4: 诺月医用硅酮凝胶	6
5: 医用硅酮疤痕修复凝胶	7
6: 医用重组人源化胶原蛋白皮肤修复敷料（凝胶）	8
7: 医用重组人源化胶原蛋白皮肤修复敷料（喷雾）	9
8: 巴克无菌敷贴	10

1：达霖堂远红外治疗贴



1. 产品概述

本品由远红外陶瓷粉、丙烯酸压敏胶和无纺布及硅油纸制成，利用远红外线穿透皮肤，产生温热效应，促进局部血液循环，缓解肌肉紧张和疼痛。

2. 产品功能

产品功能	适用颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出、骨性关节炎、软组织损伤（非急性期）的辅助治疗。
------	--

3. 产品规格与成分

产品规格	2 贴装，130mm×150mm
产品成分	远红外陶瓷粉、医用压敏胶、无纺布背衬层。

4. 使用说明

使用方法	清洁患处，确认包装无破损后，打开包装，将贴剂的隔离膜撕去，贴于患处，每 24 小时更换一次。
禁忌	装有心脏起搏器患者、出血倾向性疾病患者、局部皮肤破损感染者、孕妇及过敏体质者禁用。
注意事项	1. 仅限一次性使用，用后销毁。 2. 包装如有破损，严禁使用。 3. 使用时严格按照使用说明进行。

2：舒妙得液体敷料



1. 产品概述

本品为液体，喷涂在皮肤上后，溶剂挥发，高分子材料形成一层透气、防水、抑菌的透明薄膜，能够有效阻挡外界细菌和污物，锁住皮肤水分，创造有利于组织修复的微环境，适用于微创术后、浅表创面、皮肤问题等场景。

2. 产品功能

产品功能	涂抹后迅速成膜，形成物理屏障，阻隔细菌、灰尘和水的侵入，防止二次感染，为创面提供湿润的愈合环境，加速皮肤修复。
------	---


3. 产品规格与成分

产品规格	30ml/瓶（喷雾）。
产品成分	高分子聚合物（如卡波姆、壳聚糖或丙烯酸酯共聚物）、成膜剂、保湿剂（如甘油）和纯化水。

4. 使用说明

使用方法	1. 清洁：使用前先用生理盐水或清水清洁创面/皮肤，并轻轻吸干水分。 2. 喷涂/涂抹：喷雾型：距离皮肤 10-15cm 处均匀喷洒；涂抹型：用棉签蘸取适量液体，均匀涂抹于患处。 3. 成膜：等待 1-2 分钟，待其自然干燥形成透明薄膜。 4. 频次：每日 2-3 次，或根据创面情况遵医嘱使用。
禁忌	1. 对本品成分过敏者禁用。 2. 三度烧伤、深度溃疡创面禁用。
注意事项	1. 严禁口服，避免接触眼睛。 2. 如果创面已经化脓或有严重感染，请先咨询医生，不宜直接封闭。 3. 极少数人可能对高分子材料过敏，初次使用建议在耳后测试。 4. 形成的保护膜通常防水，普通清水难以洗掉，需使用卸妆油或酒精棉片擦拭去除（术后创面未愈合时请勿强行揭除膜层，待其自然脱落）。

3：诺月硅凝胶敷料膜

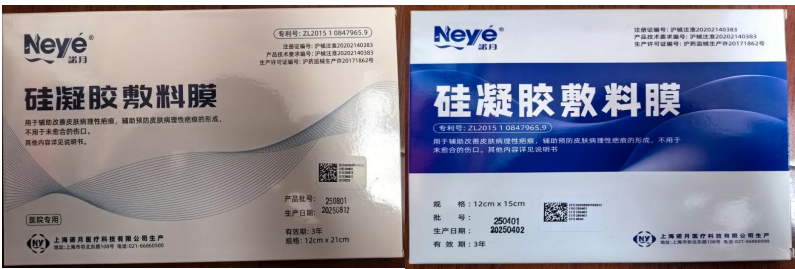

1. 产品概述

本品外观为透明、清洁、平整的薄片，具有良好的透气性和保湿性。适用于体表外伤、烧伤及手术愈合后的增生性疤痕的辅助治疗。

2. 产品功能

产品功能	物理覆盖，减少皮肤水分蒸发，使角质层水合，软化疤痕组织
------	-----------------------------

3. 产品规格与成分

产品规格	12×15cm、12×21cm
产品成分	医用级硅橡胶、硅凝胶。

4. 使用说明

使用方法	为了减少皮肤过敏风险，建议按照以下步骤建立耐受： 1. 清洁：使用前用温和肥皂清洁疤痕部位及周围皮肤，用清水洗净并彻底擦干。 2. 裁剪：根据疤痕形状和大小裁剪敷料膜，边缘应超出疤痕边缘约1cm。 3. 贴敷：撕去隔离膜，将凝胶面（粘性面）贴于疤痕上，轻轻按压使其贴合。 4. 时间递增： 第1-2天：每天贴敷 4 小时。 第3-4天：每天贴敷 8 小时。 第5-6天：每天贴敷 12 小时。 之后：如无不适（红肿、瘙痒），可逐渐增加至每天 24 小时 持续贴敷（洗澡时除外）。 5. 固定：在睡眠或剧烈运动时，为防止脱落，可用弹性绷带或胶布辅助固定。 6. 清洗与重复使用 清洗：敷料膜弄脏或粘性下降时，可用温水加中性肥皂轻轻清洗。 晾干：洗净后甩干水分，自然晾干或用吹风机冷风吹干（不可烘干）。 重复使用：晾干后可重复贴敷使用，直至粘性明显降低或破损为止（通常一片可重复使用 1-2 周，具体视护理情况而定）。 7. 疗程建议
------	--

	起效时间：通常建议连续使用 3 个月 以上。 陈旧疤痕：对于陈旧性疤痕，可能需要更长的使用时间（3-6 个月或更久）才能看到效果。
禁忌	1. 皮肤或疤痕表面有创面、溃疡、结痂未脱落时严禁使用。 2. 对硅酮类产品过敏者禁用。
注意事项	1. 极少数患者可能出现皮疹、瘙痒或水疱。如出现上述症状，应暂停使用，待皮肤恢复正常后再尝试缩短贴敷时间；若症状持续，请停止使用并咨询医生。 2. 贴敷时不要用力拉伸敷料膜，以免对皮肤造成张力，反而刺激疤痕增生。 3. 可配合弹力套使用，加压效果更佳（特别是四肢部位）。

4：诺月医用硅酮凝胶



1. 产品概述

本品为透明略带白色的软膏状凝胶，是一款涂抹式的祛疤产品，主要用于抑制和辅助治疗新生疤痕的增生。

2. 产品功能

产品功能	舒缓止痒，对抑制新生疤痕的增生有辅助作用。
------	-----------------------

3. 产品规格与成分

产品规格	15g/支、25g/支。
产品成分	八甲基环四硅氧烷、硅油、薄荷脑。

4. 使用说明

使用方法	1. 先用温水清洁疤痕部位，并彻底擦干水分。 2. 挤出适量凝胶于疤痕表面。 3. 用干净的手指将凝胶涂抹均匀，形成一层厚度约 0.1-0.5mm 的薄膜，完全覆盖创面。 4. 每日使用 3-4 次，或遵医嘱。
禁忌	1. 伤口未愈合：伤口未愈合、有分泌物、皮肤感染或发炎时禁用。 2. 过敏史：对硅酮类成分有皮肤过敏史者慎用。 3. 特殊部位：请勿用于黏膜上或靠近眼睛的部位。
注意事项	1. 仅限外用：严禁口服。 2. 如使用后出现皮疹、红肿等过敏现象，应立即停用并咨询医生。 3. 请置于儿童不易触及处。 4. 对于张力较大的部位（如关节、胸口），建议配合减张器或弹力套使用，效果更佳。

5：医用硅酮疤痕修复凝胶



1. 产品概述

本品由凝胶及多层共挤药用软膏管组成。凝胶由医用硅酮、乳化剂组成。乳化剂为油酸山梨坦（司盘 80），包装于多层共挤药用软膏管中。医用硅酮疤痕修复凝胶均匀、无肉眼可见的杂质和异物；管体帽盖与管口吻合严密，塑料软管不应有堵塞和渗漏；管身应光洁无毛刺和瑕疵。

2. 产品功能

产品功能	用于创面愈合完成后早期瘢痕的预防和改善。
------	----------------------

3. 产品规格与成分

产品规格	18g
产品成分	医用硅酮（聚二甲基硅氧烷等）、卡波姆、纯化水。

4. 使用说明

使用方法	伤口愈合后清洁创面，将适量的医用硅酮疤痕修复凝胶挤在创面，用手指将凝胶均匀涂开，厚度为 0.1mm，以覆盖创面为准，间隔 3-4 个小时涂抹一次，或遵医嘱；再次使用时，如创面不洁应先清洁创面。
禁忌	1. 伤口未愈合、有分泌物、皮肤感染或发炎时禁用。 2. 对硅酮类产品过敏者禁用。
注意事项	1. 仅限外用，严禁口服。 2. 极少数患者可能出现皮疹、瘙痒等不适。如出现上述症状，应暂停使用并咨询医生。 3. 请勿用于黏膜上或靠近眼睛的部位。 4. 对于张力较大的部位（如关节、胸口），建议配合弹力套使用，加压效果更佳。

6：医用重组人源化胶原蛋白皮肤修复敷料（凝胶）



1. 产品概述

本品为伤口愈合提供微环境，并促进伤口愈合及皮肤修复。适用于浅表性伤口、机械性创伤、术后缝合伤口、小擦伤、切割伤、穿刺器械造成的穿刺点、I 度或浅 II 度烧伤，以及激光/光疗/化学剥脱/微美容程序后的伤口和其他非慢性伤口。

2. 产品功能

产品功能	提供有利于伤口愈合和皮肤修复的微环境。
------	---------------------

3. 产品规格与成分

产品规格	20 克/支
产品成分	重组人源化 III 型胶原蛋白、细菌纤维素、β-葡聚糖、卡波姆、三乙醇胺、纯化水、依地酸二钠、羟苯甲酯和羟苯丙酯。

4. 使用说明

使用方法	仅供外用。清洁患处皮肤，并将本产品涂抹于所需部位。
禁忌	如果您对本产品或其任何成分过敏，请勿使用。
注意事项	1. 包装破损请勿使用。 2. 产品一旦开封，无法保证无菌，应立即使用。 3. 产品应放置在清洁区域，以防污染。 4. 请在保质期内使用本产品。 5. 如有不适或皮肤异常反应，建议停止使用。

7：医用重组人源化胶原蛋白皮肤修复敷料（喷雾）



1. 产品概述

本品为伤口愈合提供微环境，并促进伤口愈合及皮肤修复。适用于浅表性伤口、机械性创伤、术后缝合伤口、小擦伤、切割伤、穿刺器械造成的穿刺点、I 度或浅 II 度烧伤，以及激光/光疗/化学剥脱/微美容程序后的伤口和其他非慢性伤口。

2. 产品功能

产品功能	提供有利于伤口愈合和皮肤修复的微环境。
------	---------------------

3. 产品规格与成分

产品规格	30 克/瓶
产品成分	重组人源化 III 型胶原蛋白、细菌纤维素、β-葡聚糖、卡波姆、三乙醇胺、纯化水、依地酸二钠、羟苯甲酯和羟苯丙酯。

4. 使用说明

使用方法	仅供外用。清洁患处皮肤，并将本产品涂抹于所需部位。
禁忌	如果您对本产品或其任何成分过敏，请勿使用。
注意事项	1. 包装破损请勿使用。 2. 产品一旦开封，无法保证无菌，应立即使用。 3. 产品应放置在清洁区域，以防污染。 4. 请在保质期内使用本产品。 5. 如有不适或皮肤异常反应，建议停止使用。

8：巴克无菌敷贴



1. 产品概述

本品是通过纳米现代高科技生物技术提取绿色植物精华及竹纤维运用特殊工艺制成无纺布或纱布为基础，以巴克细胞再生母原料为核心，配以凡士林等基质制成的医用生物敷料。

2. 产品机理与特点功能

作用机理	使用本品后，能够代替原有皮肤的呼吸、屏障功能，防止水分蒸发，快速释放细胞再生所需的各种营养物质，提供皮肤及组织细胞再生所需要的生理湿润环境，激发人体释放各种再生因子，使受损细胞快速修复，同时使其和正常细胞一起快速分裂增殖，从而达到皮肤组织细胞修复再生。
产品特点	安全性高：产品成分为纯绿色植物提取，使用安全； 止血快：快速封堵创口，加速血凝过程； 止痛快：产品特有成分有效保护神经末梢，有效减轻伤口疼痛； 抑菌性：产品特有成分有效抑制有害菌的繁殖，增强局部杀菌能力，降低感染发生率； 抑制疤痕形成：产品直接修复受损细胞以达到修复创面作用，所以疤痕形成少，能有效控疤、抑疤。
产品功能	促进皮肤及组织细胞再生，加速伤口愈合，迅速止痛、抗菌消炎、减少疤痕及增生粘连。

3. 产品规格与结构

产品规格	70mm×90mm、120mm×250mm。
结构及组成	由涂有医用压敏胶的无纺布、吸液垫和隔离纸组成。压敏胶带剥离强度不小于 1N/cm、持粘性不大于 2.5mm、吸液垫的吸液量应不小于 20g/100cm ² 、细胞毒性不大于 I 级、无迟发性超敏反应、皮肤刺激指数不大于 1.0。